


TRIO<sup>TM</sup>  
CLEAR



**TRIOCLEAR<sup>TM</sup>**  
iDesign vejledning

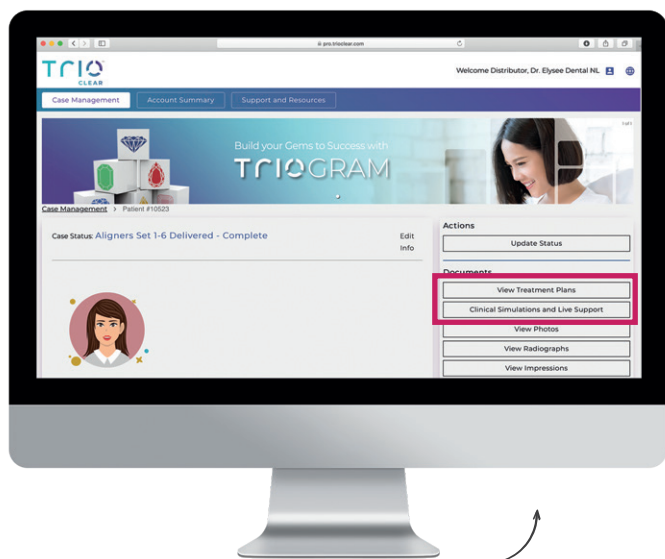

Brugeren kan klikke på simulationsviseren i disse 2 funktioner

Musen betjenes i vinduet 3D-visning på følgende måde vist som nedenfor:

Zoom



Scrol

Panorama



Klik

Rotér



Klik

- 1 Værktøjslinje
- 2 3D-visning
- 3 Sidepanel: Designplan, Historik, Klinisk instruktion, Trin, Foto, Rediger
- 4 Animationsværktøjer



**Værktøjslinjen:** omfatter værktøj til visning af objekter og visningsværktøjer.




**Animation af behandlingsplan:**




- 1 Afspilningsfunktioner
- 2 Indstilling af hastighed
- 3 Igangværende trin/ Samlet antal trin
- 4 Det trin, hvor modellen vises i 3D-visningsvinduet
- 5 Samlede trin


## SIDE PANEL

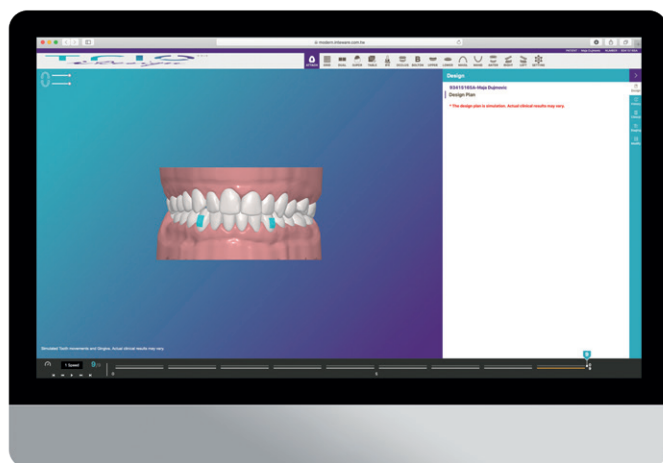

Fanen **Trin** viser oversigt og behandlingsoplysninger om bevægelsen for hver tand i hvert trin.

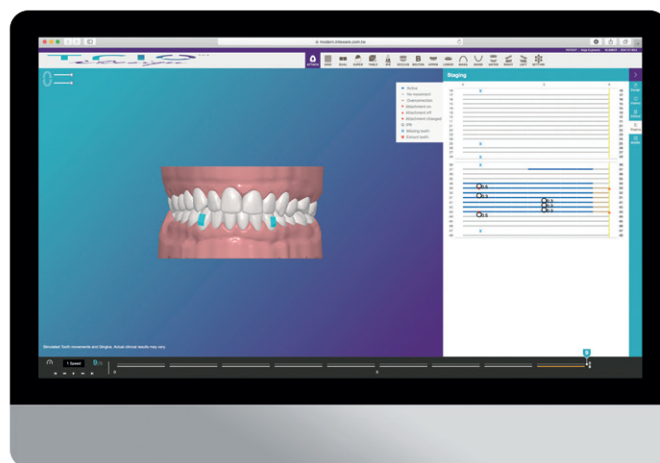


Sidepanelet indeholder sagsakter, herunder designplaner og historik.

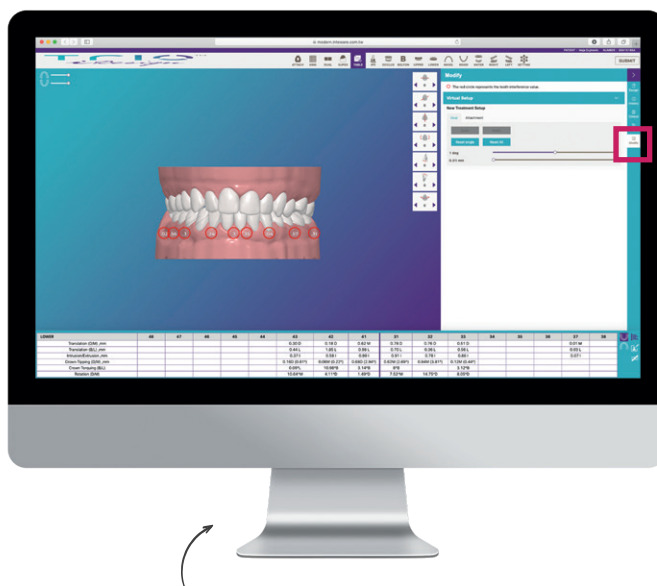

Om nødvendigt kan du ændre behandlingsplanen direkte i simulationsviseren. Klik på knappen **Opret ændring** for at justere slutresultatet eller justere attachments.



## JUSTERINGER

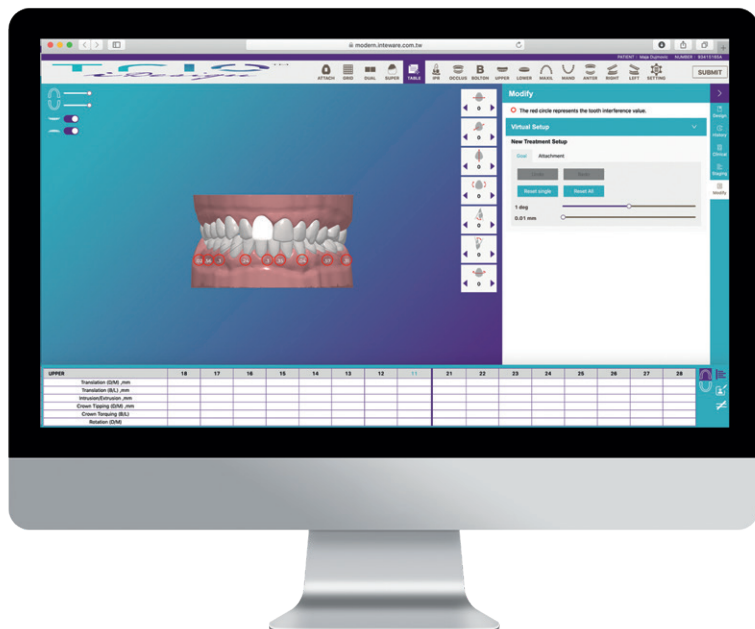

1. Vælg fanen **Mål**. Træk i skyderen for at indstille bevægelsesintervallet og rotationsgraden.

2. Venstreklik for at vælge en tand på modellen. Den valgte tand bliver hvid.

3. Klik for at vælge bevægelsestype fra følgende værktøjer.



Translation (distal/mesial)



Translation (buccal/lingual)



Intrusion/ekstrusion



Krone kipning (distal/mesial)



Rod torque (buccal/lingual)



Krone torque (buccal/lingual)




Rotation (distal/mesial)

4. Klik på ◀ ▶ for at ændre tandens position



# JUSTER ATTACHMENTS

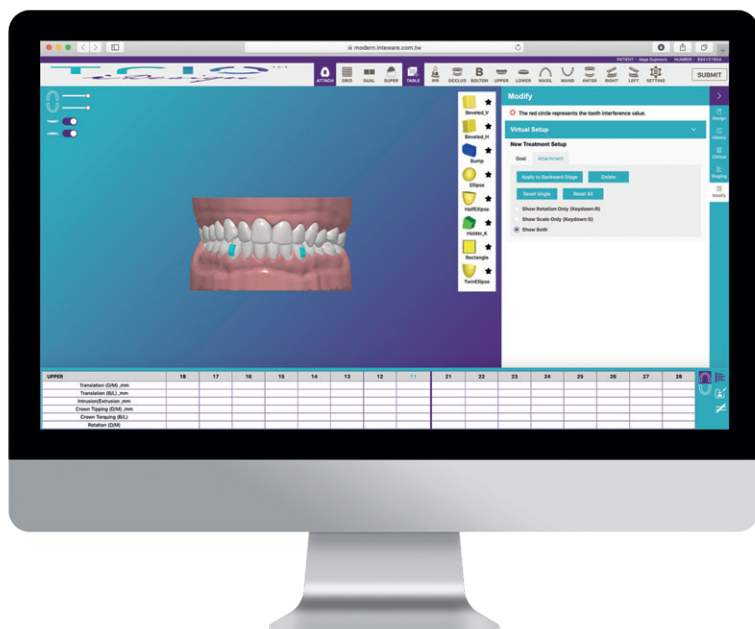

1. Vælg fanen **Attachment**.
2. Vælg et attachment.
3. Dobbeltklik med venstre museknap på tanden for at placere et attachment.
4. For at justere et attachment:
  - Venstreklik for at vælge det attachment, der skal justeres.
  - **Translation:** Hold venstre museknap nede på attachmentet, og træk til den ønskede position.
  - **Skaler:** Træk i **Rød**, **Grøn**, eller **Blå** firkant til henholdsvis at skalere i X-, Y- eller Z-aksen. Træk i den **grå** firkant kan skalere i alle akser.
  - **Rotation:** Træk i **Rød**, **Grøn**, eller **Blå** firkant til henholdsvis at rotere langs X-, Y- eller Z-aksen.

## 5. Andre funktioner:

**Anvend det bagudrettede trin** Anvend attachment på alle de efterfølgende trin.

**Slet** Slet det valgte attachment.


**Nulstil enkelt** Nulstil det valgte attachment til den oprindelige tilstand.

**Nulstil alle** Nulstil alle attachments til den oprindelige tilstand.

**Vis kun rotation** Vis kun rotationsmarkøren.


**Vis kun skalering** Vis kun skaleringsmarkør.

**Vis begge** Vis både rotations- og skaleringsmarkør.

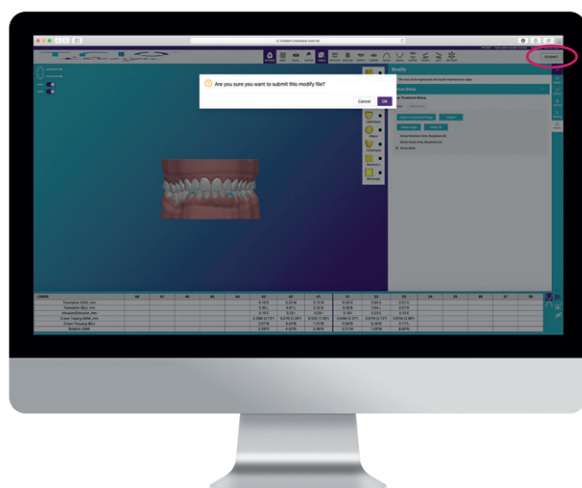

## Tryk på indsend

Når designet er justeret, skal du klikke på knappen **INDSEND** for at indsende det ændrede design. Ved at bekræfte indsendelse i pop vinduet, sikrer du dig at det ændrede design er afsendt.

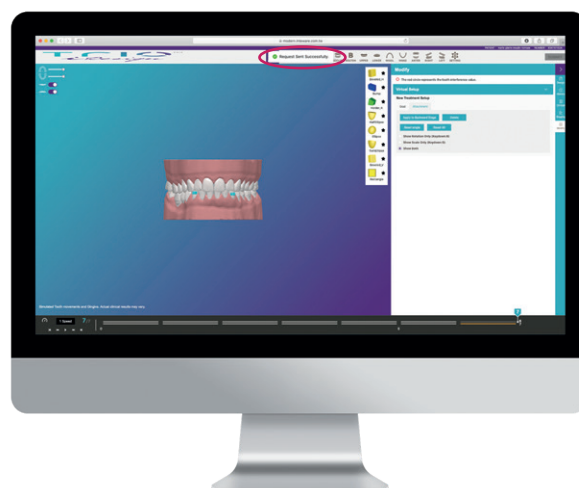

## Anmodning indsendt

Du vil modtage en system-genereret bekræftelsesmeddelelse, når anmodningen er indsendt og modtaget (se det lyserøde mærke).



Du kan tjekke sagsjournalen: se ovenstående billede. Det betyder, at anmodningen er blevet accepteret.



