



MEDIT *i700*

Unleash your clinic's potential

MEDIT




Skanning

Medit har legat i framkant när det gäller att förverkliga det enkla inträdet i digital tandvård. Medit försöker alltid förbättra tandläkarens och patientens upplevelse på kliniken.

Hur kan vi utveckla en produkt bortom användarnas fantasi?
Hur ska vi införliva vår avancerade skanningsteknik och 20 års ingenjörskunskap?

Medit återskapar intraoral skanning.

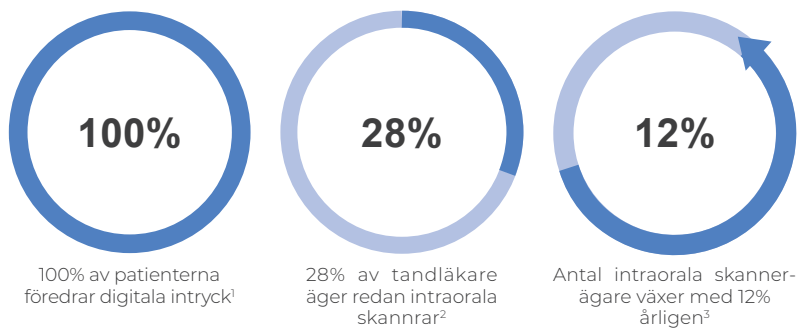

Vi tror att digital tandvård kommer att frigöra din kliniks potential. Föreställ dig hur digital tandvård kan förändra dig, dina patienter och dina labbpartners liv.

För detta ändamål slutar Medit aldrig att utveckla skanningssystem med kontinuerliga produktupptraderingar.



¹ Mangano, A., Beretta, M., Luongo, G., Mangano, C., & Mangano, F. (2018). Conventional Vs Digital Impressions: Acceptability, Treatment Comfort and Stress Among Young Orthodontic Patients. *The open dentistry journal*, 12, 118–124. <https://doi.org/10.2174/1874210601812010118>


² Mazda, J. (2019). Trends in Dentistry. *Inside Dentistry*, 15(1). <https://www.aegisdentalnetwork.com/id/2019/01/trends-in-dentistry>

³ Intraoral Scanners Market: 12% CAGR Growth During 2020-2024: Technavio. (2020, October 22). Retrieved January 26, 2021, from <https://www.businesswire.com/news/home/20201022005895/en/Intraoral-Scanners-Market-12-CAGR-Growth-During-2020-2024-Technavio>



Överblick på Medit i700

Medit i700 gör skanningsupplevelsen bekväm för både tandläkare och patient. Med både **kraftfull hårdvara** och **intelligent programvara** är Medit i700 nyckeln till att frigöra din kliniks fulla potential.

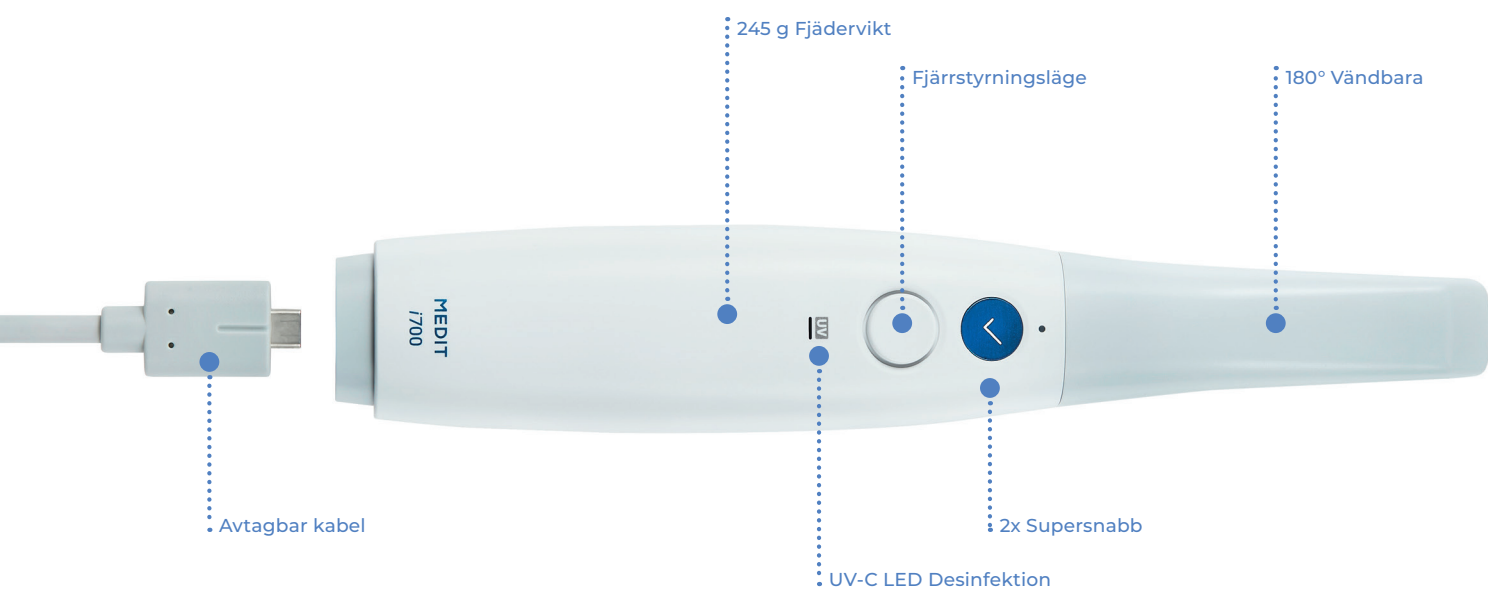

Medit Link

Skanna med gratis **intelligenta funktioner** och appar som är **särskilt utarbetade** för tandläkare. Förbättra konsultationsupplevelsen för din patient genom **att ge bättre behandlingsalternativ**. Förbättra din kommunikation med tandlaboratorier genom **det molnbaserade systemet, Medit Link**.

Medit är ett av de snabbast utvecklande företagen i branschen för att tillhandahålla **mjukvaruuppdateringar**. Användare får en skanner med förbättrad prestanda och nya funktioner enbart genom programvaruuppdateringar.

Medit Link är ett helt öppet system för dig



Dashboard




Workflow Management



Cloud Service




Patient Communication

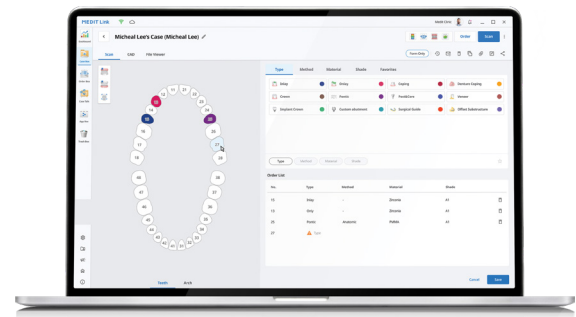


Skanning och kommunikation

Smart Scan Filtering

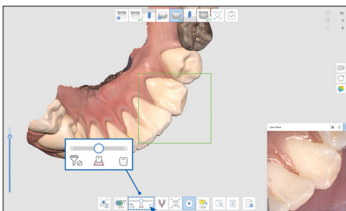


Tar bort onödiga mjukvävnadsdata som är en av de största utmaningarna när du utför skanningar.

Medit Ortho Simulation

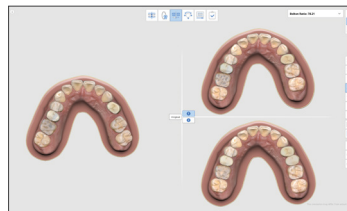


Hjälp patienten att visualisera potentiella resultat vid en ortodontisk behandling.

Cloud-based Service

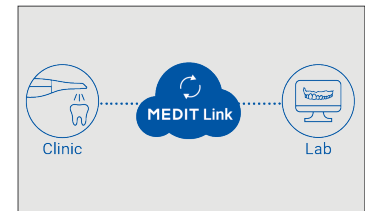

Lagra all data i molnet. Arbeta med dina ursprungliga skanningar, arkivera dina digitala skanningar och beställningar, hantera dina ärenden var du än är.

Smart Colour Filtering

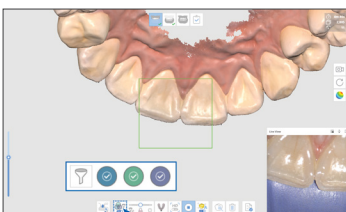


Filtrerar automatiskt bort vald färg under skanningen, t.ex. färgen på handsken. Underlättar skanningen.

Medit Smile Design



Visa patienterna deras framtida leende eller hjälp dem att föreställa sig behandlingsresultatet.


Web Viewer & Case Talk

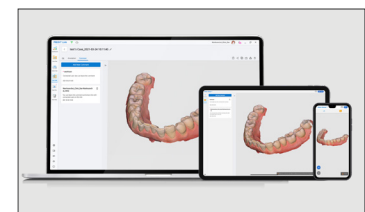

Upplev smidigare kommunikation, med partners och patienter. Se skannade filer på vilken dator som helst och dela information. All data lagras säkert.


Behandlingar

Margin Line Creation

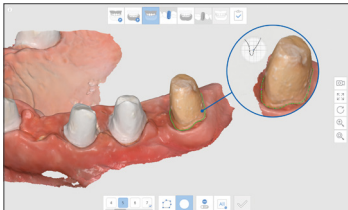


Välj mellan att låta systemet automatiskt placera prepgränsen för en tand eller skapa den manuellt.

Denture Scanning

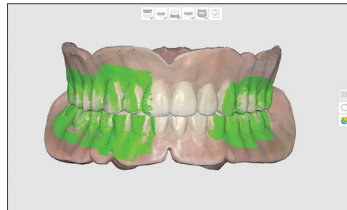


Skanna tandlösa patienter, och/ eller den inre ytan av proteser.

A.I. Scanbody & Abutment matching

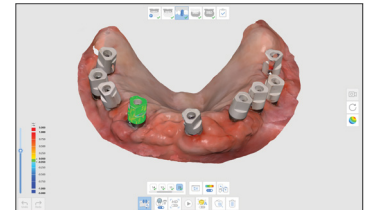


Distanser och scanbodies matchas automatiskt och överförs till din skanningdata.

Medit Crown Fit

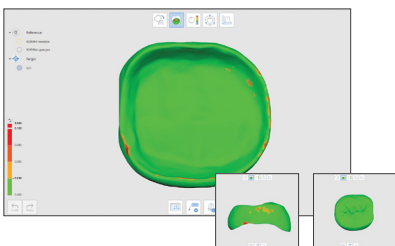

Gör en modellfri digital kronkontroll. Mjukvaran kan visa var justering kan vara nödvändig.

Impression Scanning

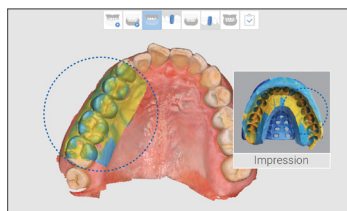

Hämta data från svårskannade områden genom att skanna ett analogt avtryck och kombinera detta med det digitala avtrycket.

Face Scan



Skanna patientens ansikte, importera 3D-ansiktsdata och bendata. Informationen bearbetas och kan vara ett hjälpmedel för att få ett bättre slutresultat.

Använd Medit i700

för ett brett spektrum av konstruktioner

Medit Links öppna system gör att du kan använda dina skanningsdata för alla typer av arbetsflöden och med alla mjukvaruprogram som gör det möjligt att importera STL-, PLY- och OBJ-filer.


Detta innebär att du kan använda skanningsdata för bl. a:



Clear Aligners



Kronor & Broar

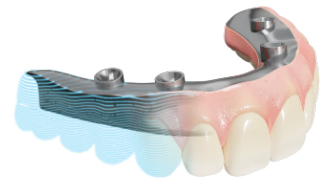

Implantatlösningar

Hel- och delproteser | Ortodonti | Kirurgiska implantat guideskenor | Snarkskenor | Studiemodeller
... och mycket mer!

Vår Medit-community

Njut av att arbeta med en mängd olika partners i olika projekt!

Våra användare har alltid varit kärnan i allt vi gör och vi är stolta över att ha byggt upp en gemenskap som inte bara ger oss konstant feedback och förslag, utan också aktivt stöd och hjälp. 2020 vann Medit iDD IntraOral Scanner Awards pris för Best Community Support.

Vi bygger även en kunskapsbank som du har tillgång till var och när det passar dig. Där finner du videovägledning på vår Medit Academy Youtube-kanal eller läs användbara artiklar i Help Center.

Detta innebär att du aldrig behöver oroa dig för att vara ensam i din skanningsresa. Det finns alltid hjälp att hitta



Specifikationer

Kategori	Medit i700	
Skanningsteknik	Scanning Frame	Upp till 70 FPS (Bilder Per Sekund)
	Bildteknik	3D-in-motion videoteknik Streaming i 3D i full färg
	Ljuskälla	LED
	Anti-fogging teknik	Adaptiv anti-fogging
Noggrannhet	Full-käke	10.9µm ± 0.98
Handstycke	Dimensioner	248 x 44 x 47.4 mm
	Vikt	245 g
Tipp	Tipp storlek	22.2 x 15.9 mm
	Spegelvinkel	45-graders vinkel
	Scanområde	15 x 13 mm
	Autoklaverbar	Upp till 100 gånger Autoklav 121°C 30 min Autoklav 134°C 4 min
	Vändbar spets	Ja
Specialfunktion	Fjärrstyrningsläge	Ja
	UV-C desinfektion	Ja
Kabel	Längd	2.0 m / Handstycke avtagbart
	Uppkoppling	USB 3.1 Gen1 (C Power Delivery)

Plug & Scan

När du beställer Medit i700 via CDI Dental kommer en högpresterande bärbar dator att inkluderas i din beställning. Denna bärbara dator kommer att förses med den rätta programvaran. Ingen IT-specialist krävs för att börja arbeta med intraorala skannern; när du tar emot skannern kan du börja skanna direkt.



Fördelarna med att köpa din skanner via CDI Dental!

Som en av de första återförsäljarna för Medit, har vi god kunskap av de revolutionerande Medit skannrarna. Förutom att dela denna kunskap med våra kunder tillämpar vi den också i vårt uppdrag att erbjuda fullständiga digitala lösningar. Detta gör arbetsflödet mycket effektivare, billigare och pålitligare. Vi stödjer våra Medit-användare genom att erbjuda tjänster som vårt utbildningsprogram, så att du kan använda din intraoralskanner till sin fulla potential.



Öppen skanner

Medit i700 är en öppen skanner. Du kan exportera alla filer vart du vill, utan kostnad. Detta gör att du alltid kan förbli flexibel i dina beslut.



Utbildning

När du köper skannern kommer du och dina kollegor att erbjudas utbildning av vår CAD / CAM-specialist. Utbildningen kommer i de allra flest fall äga rum på tandläkarens praktik. Där går vi igenom allt som rör skanning och skanningsteknik.



Stöd

Om du stöter på frågor eller problem under ditt arbete med **Medit i700**, är du välkommen att kontakta oss. Antingen via telefon, e-post eller team-viewer. Vi finns här för att supporta dig.



Innovation

Vi arbetar ständigt med att optimera våra processer och produkter. Via våra webinar och kurser informerar vi dig gärna om det senaste inom tandteknik.

Intresserad? Anmäl dig för en kostnadsfri demonstration på din klinik!

Att köpa en skanner är ett stort beslut. Om du är intresserad av vad **Medit i700** kan ge dig för möjligheter, kommer vi gärna till din klinik och demonstrerar de många fördelarna som Medit har. Vänligen kontakta oss för att boka ett möte.

Ring: +46 (0)40 607 77 79 eller skriv ett e-post: c.adlercreutz@cdi-dental.com.

